


Bandeja

FLUORESCENTE

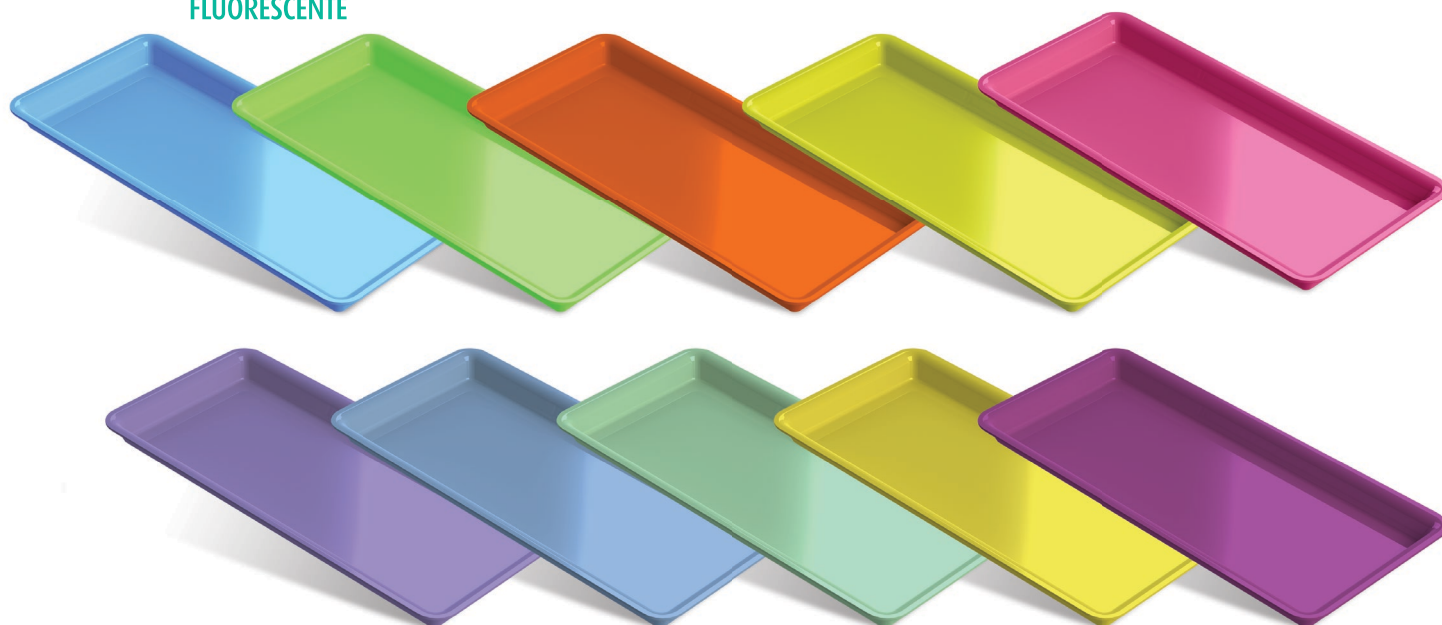

MATE

- Variedad de colores
- Leves y resistentes
- Autoclavables

BANDEJA: Se utiliza como una herramienta de apoyo para los profesionales de las distintas áreas de la odontología y la medicina, ya que permite el alojamiento y la organización de los instrumentos durante la ejecución de los procedimientos. Hecha de resina que permite la esterilización en autoclave. Su formato hace que sea fácil de limpiar y desinfectar. Disponible en varios colores que permiten una mejor armonía con otros productos de su consultorio.

INDICACIÓN: Acomodación y organización de instrumentos dentales. Utilizado en las áreas de la odontología y medicina.

INSTRUCCIONES DE USO: Esterilice la bandeja odontológica en el autoclave y después de este procedimiento, ponga la bandeja en la mesa clínica. Acomode los instrumentos en el interior de la bandeja, de acuerdo con la necesidad.

MEDIDAS: Pequeña: 224x101,70x14mm / Media: 224x128x14mm y / Grande: 224x164,5x14mm.

LIMPIEZA: La remoción de materia orgánica debe hacerse en lavadoras ultrasónicas con jabón enzimático (mínimo de tres enzimas) en dilución recomendada por el fabricante. Después de lavar en agua corriente y observar presencia de residuos, repita el proceso, si persiste, se debe retirar los residuos a través de limpieza manual.

DESINFECCIÓN: Uso de solución de ácido peracético al 0,2% para diez minutos.

ESTERILIZACIÓN: Deberá realizarse en autoclave a una temperatura de 121°C a 135°C, en cumplimiento con las recomendaciones del manual de instrucciones del fabricante del autoclave. Repetir el proceso para cada uso.

ACONDICIONAMIENTO: Conservar el producto en un lugar exclusivo, en recintos cerrados, protegidos del polvo y insectos.

COMPOSICIÓN: Polipropileno y pigmentos.

PRECAUCIÓN: Esterilizar antes del uso. No permita que el producto toque las paredes interiores del autoclave.

PLAZO DE VALIDEZ DEL PRODUCTO: Este producto tiene una validez de 05 años a partir de la fecha de su fabricación, en embalajes que no hayan sido violados. Su plazo de vida útil depende de los cuidados durante su uso. Sucesivos usos y esterilizaciones conducen a la fatiga del material y limitan su vida útil. Verifique la condición del producto antes de cada uso y compre un nuevo caso pueda observar fatiga excesiva o presenten riesgo de quiebra.

Código

Descripción

Presentación

ANVISA

103064101201	Bandeja Pequeña Rosa Fluorescente	1 unidad	180213420031
103064101202	Bandeja Media Rosa Fluorescente	1 unidad	
103064101203	Bandeja Grande Rosa Fluorescente	1 unidad	
103064101204	Bandeja Pequeña Verde Fluorescente	1 unidad	
103064101205	Bandeja Media Verde Fluorescente	1 unidad	
103064101206	Bandeja Grande Verde Fluorescente	1 unidad	
103064101207	Bandeja Pequeña Amarillo Fluorescente	1 unidad	
103064101208	Bandeja Media Amarillo Fluorescente	1 unidad	
103064101209	Bandeja Grande Amarillo Fluorescente	1 unidad	
103064101210	Bandeja Pequeña Azul Fluorescente	1 unidad	
103064101211	Bandeja Media Azul Fluorescente	1 unidad	
103064101212	Bandeja Grande Azul Fluorescente	1 unidad	
103064101213	Bandeja Pequeña Naranja Fluorescente	1 unidad	
103064101214	Bandeja Media Naranja Fluorescente	1 unidad	
103064101215	Bandeja Grande Naranja Fluorescente	1 unidad	
103064101216	Bandeja Pequeña Rosa	1 unidad	
103064101217	Bandeja Media Rosa	1 unidad	
103064101218	Bandeja Grande Rosa	1 unidad	
103064101219	Bandeja Pequeña Verde Claro	1 unidad	
103064101220	Bandeja Media Verde Claro	1 unidad	
103064101221	Bandeja Grande Verde Claro	1 unidad	
103064101222	Bandeja Pequeña Amarilla	1 unidad	
103064101223	Bandeja Media Amarilla	1 unidad	
103064101224	Bandeja Grande Amarilla	1 unidad	
103064101225	Bandeja Pequeña Azul Claro	1 unidad	
103064101226	Bandeja Media Azul Claro	1 unidad	
103064101227	Bandeja Grande Azul Claro	1 unidad	
103064101228	Bandeja Pequeña Lilá	1 unidad	
103064101229	Bandeja Media Lilá	1 unidad	
103064101230	Bandeja Grande Lilá	1 unidad	



Indusbelo Ind. e Com. de Prod. Méd. e Odontológicos. Ltda.

CNPJ 74.017.708/0001-91 | Aut. Func./MS 15341379-MW34 +55 (43) 3378-8300

R. Tereza de Souza, 171 | Pq. Ind. Kiugo Takata CEP 86042-390 Londrina-Paraná

Resp. Técnico: Willian Ramos - CRQ IX Região 09903397

Dr. Rubens Henrique Pinheiro de Souza - CRO-PR 6645



Indústria Brasileira